

Wprowadzenie


Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było jak najbardziej przyjazne w użytkowaniu, jednak zalecamy poświęcenie chwili na przeczytanie niniejszej instrukcji, aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości tego produktu. Każda mama potrzebuje dobrego laktatora, który sprawdzi się w różnych sytuacjach. Ten laktator pozwoli Ci w komfortowy sposób odciągać mleko zarówno w domu, jak i w podróży.

Prosimy o przechowywanie instrukcji w suchym i bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Zawartość opakowania



Jeśli któregoś z elementów brakuje lub jest uszkodzony, skontaktuj się ze sklepem, w którym dokonano zakupu, w celu wymiany.

1. Pokrywka ochronna przed kurzem
2. Silikonowy lejek masujący
3. Korpus laktatora z kołnierzem
4. Membrana ssąca
5. Pokrywka laktatora
6. Uchwyt
7. Tłok dwustopniowy
8. Zawór ssący
9. Butelka do karmienia (150ml)
10. Podstawka
11. Pokrywka ochronna przed kurzem
12. Smoczek
13. Pierścień
14. Dysk uszczelniający
15. Dodatkowy korpus butelki (tylko 150ml)
16. Welurowy woreczek (niewidoczny na ilustracji)







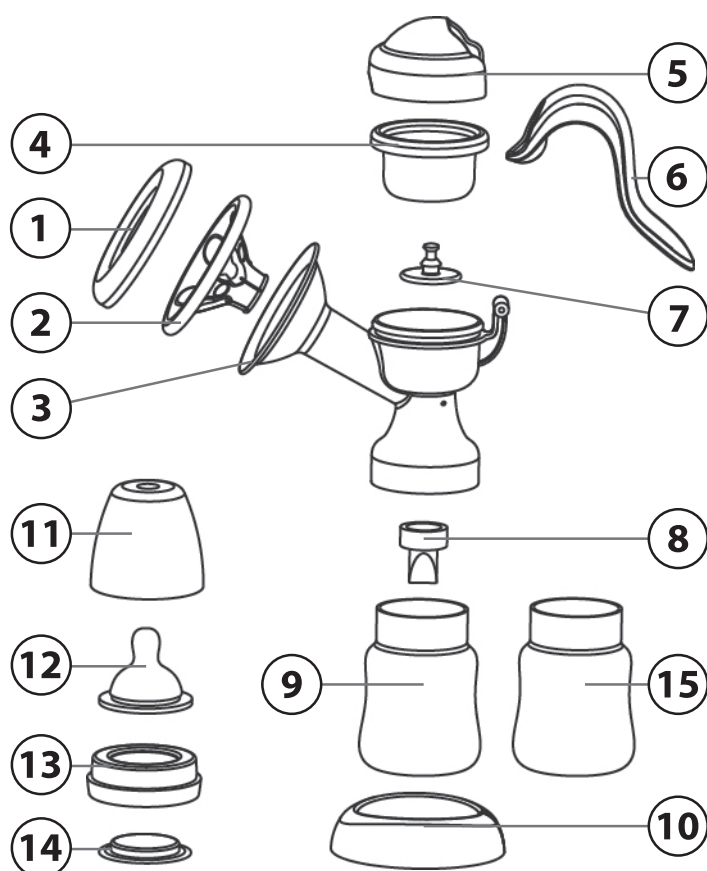


Instrukcja montażu

1. Umieść tłok mocno w membranie ssącej.
2. Włóż membranę ssącą do korpusu laktatora. Upewnij się, że karbowana silikonowa krawędź dokładnie przylega do okrągłego brzegu otworu.

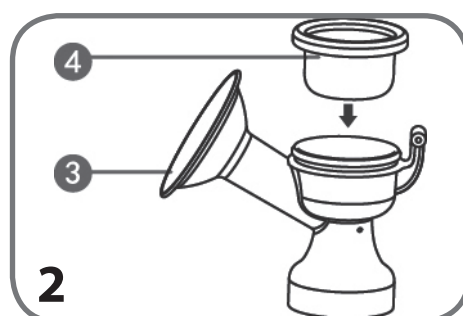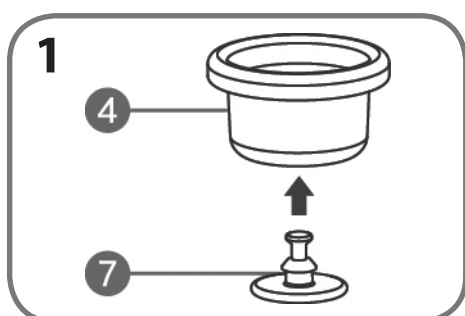

3. Nałóż silikonowy lejek masujący szczelnie na kołnierz.
4. Przymocuj uchwyt do tłoka.
5. Zamocuj pokrywę laktatora, upewniając się, że dobrze przylega.
6. Zakryj kołnierz pokrywką ochronną przed kurzem.
7. Delikatnie i dokładnie zamontuj zawór ssący.
8. Dokręć butelkę do korpusu laktatora.
9. Wciśnij korpus laktatora na podstawę, aby zakończyć montaż.

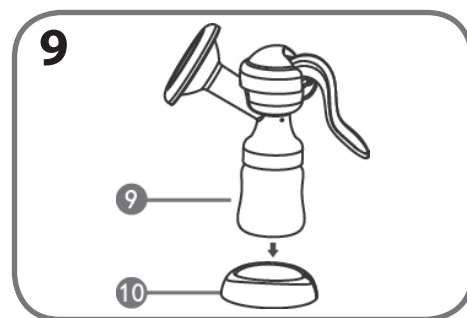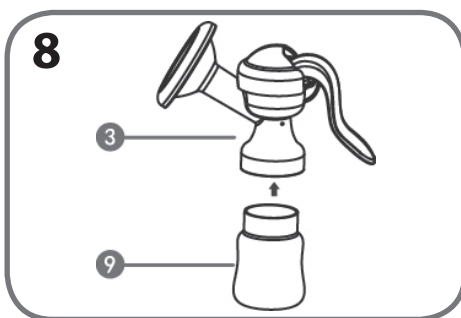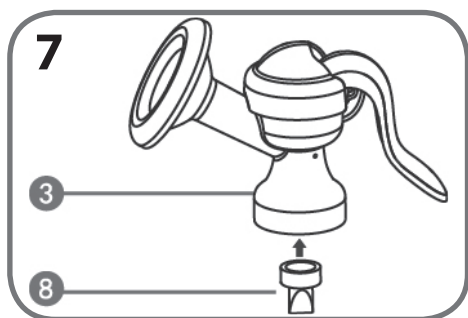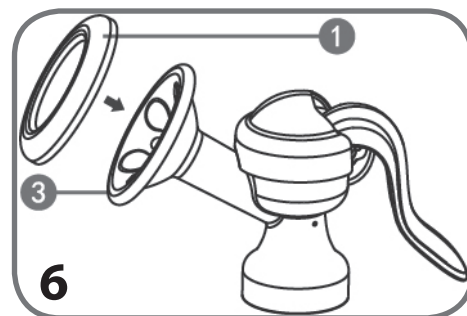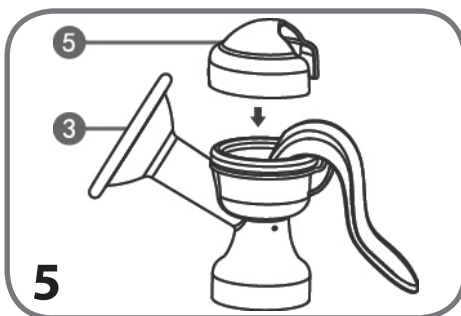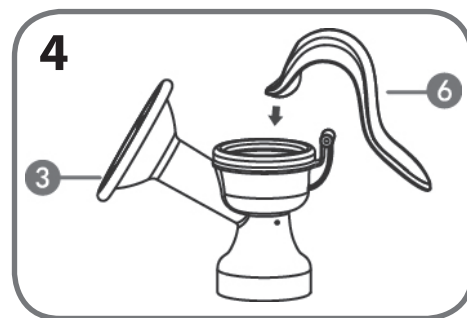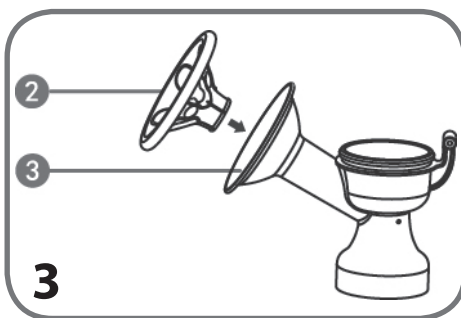

Używanie laktatora

1. Umyj dokładnie ręce przed użyciem laktatora.
2. Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste, suche i prawidłowo złożone przed każdym użyciem.
3. Usiądź w wygodnej pozycji i zrelaksuj się. Lepszy efekt odciągania można uzyskać, stosując ciepłe kompresy żelowe na piersi lub przykładanie ciepłego ręcznika przed rozpoczęciem odciągania. Poświęć chwilę (ok. 60–90 sekund) na delikatny masaż piersi, a następnie rozpocznij szybkie, delikatne pompowanie przy użyciu poziomu 1 tłoka.
4. Przejdź do trybu odciągania, ustawiając tłok na poziom 2 i naciskając uchwyt pewnym, ale komfortowym chwytem. Drugą ręką przytrzymaj pierś, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza i uzyskać efekt próżni.



5. Urządzenie wyposażono w specjalny mechanizm obrotowy, obróć uchwyt pod wygodnym kątem, aby ułatwić odciąganie mleka.

6. Po zakończeniu odciągania odłącz butelkę od korpusu laktatora.

Odciągnięte mleko matki jest bogate w składniki odżywcze. Aby zachować jego świeżość, przechowuj mleko w odpowiednim pojemniku w lodówce lub zamrażarce.

Aby uniknąć bólu brodawek, nie kontynuuj odciągania, jeśli nie udaje Ci się uzyskać mleka. Natychmiast przerwij odciąganie, jeśli odczuwasz ból palców, dłoni lub nadgarstka.

Czyszczenie laktatora

Czyść laktator po każdym użyciu.

Rozłóż laktator na części i umyj wszystkie elementy w zmywarce lub w gorącej wodzie z dodatkiem bezzapachowego płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie opłucz. Zaleca się sterylizację części po każdym użyciu, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Pozostałości zapachu po myciu mogą zniechęcać dziecko do karmienia. Nie używaj agresywnych detergentów ani środków antybakteryjnych.

Serwis

Czyść laktator po każdym użyciu.

Dołożono wszelkich starań, aby produkt, akcesoria dołączone do zestawu oraz dokumentacja spełniały najwyższe standardy jakości. W przypadku problemów zaleca się powtórzenie czynności zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.

Więcej informacji o pomocy technicznej można znaleźć na stronie: www.nuvitababy.com



UWAGA

- **Używaj wyłącznie akcesoriów dostarczonych w zestawie.**
- **Upewnij się, że urządzenie nie jest wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani wysokiej temperatury.**
- **Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, nie zaleca się udostępniania go innym osobom. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy zapewnić każdemu użytkownikowi osobny zestaw elementów mających kontakt z ciałem i mlekiem (np. silikonowy lejek, butelkę). Wszystkie części należy każdorazowo wysterylizować.**
- **Nie używaj urządzenia w przypadku senności lub podobnych objawów, odciąganie mleka przełoż na bardziej odpowiedni moment.**

GWARANCJA - WARUNKI I ZASADY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent udziela konsumentowi prawnej gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu widniejącej na paragonie lub fakturze.

Z gwarancji 24-miesięcznej wyłączone są elementy określone jako „zużywalne” (np. baterie, końcówki szczotek lub części podlegające naturalnemu zużyciu). Gwarancja 24-miesięczna traci ważność w przypadku:

1. Uszkodzeń estetycznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.
2. Modyfikacji lub ingerencji w produkt.
3. Awarii spowodowanej niewłaściwą konserwacją części lub akcesoriów (np. korozja, osadzanie się kamienia wskutek pozostawienia wody lub innych cieczy, zablokowanie sensora osadem, wyciek żrącej cieczy z baterii).

Z gwarancji 24-miesięcznej wyłączone są:

1. Koszty związane z wymianą lub naprawą części ulegających naturalnemu zużyciu oraz koszty zwykłej konserwacji produktu.
2. Koszty i ryzyko transportu produktu do i ze sklepu, w którym dokonano zakupu, lub do autoryzowanego punktu przyjęć w celu realizacji naprawy gwarancyjnej.
3. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją lub użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi.
4. Uszkodzenia wynikające z klęsk żywiołowych, wypadków lub innych niekorzystnych warunków niezgodnych z przeznaczeniem produktu.
5. Wady mające nieistotny wpływ na działanie produktu.

Producent, dystrybutor oraz wszystkie podmioty uczestniczące w sprzedaży nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody ekonomiczne wynikające z awarii produktu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent, dystrybutor oraz sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani pośrednie, utratę dochodów, oszczędności ani inne szkody wtórne przekraczające zakres samej gwarancji, wynikające z naruszenia umowy, zaniedbania lub innych przyczyn, w tym z braku możliwości korzystania z produktu czy dokumentacji papierowej i elektronicznej, a także z braku świadczenia serwisu.

Produkt spełnia wymagania dotyczące ogólnej migracji określone w dyrektywie Komisji Europejskiej 2002/72/WE oraz 2007/19/WE i ich nowelizacjach, dotyczących materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością wodną (o pH > 4,5) oraz tłustą.

Produkt jest zgodny z następującymi normami:

EN-1186-3:2002

Materiały mające kontakt z żywnością, tworzywa sztuczne, materiały opakowaniowe, pojemniki, procesy produkcji żywności, technologia żywności, badania żywności, migracja chemiczna, zanieczyszczenia, oznaczanie zanieczyszczeń w żywności, analiza chemiczna i testowanie.

EN-1186-2:2002

Materiały mające kontakt z żywnością, tworzywa sztuczne, materiały opakowaniowe, pojemniki, procesy produkcji żywności, technologia żywności, badania żywności, oliwa z oliwek, oleje roślinne, migracja chemiczna, zanieczyszczenia, analiza chemiczna i testowanie, oznaczanie zanieczyszczeń w żywności, tłuszcze.